


## Instrucțiuni de ambalare pentru retur Return Packaging Instructions

Odată ce recolectarea este terminată, plasati toate probele (tesut din cordonul ombilical, sânge matern și sânge din cordonul ombilical) în interiorul Pungii / Pungilor Specimen Biohazard. Sigilați pungile prin dezlipirea benzii albe autoadezive și plierea peste margine.

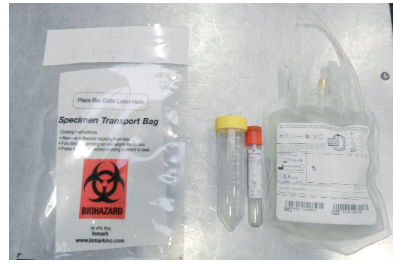

Once the collection is complete place all samples (Cord tissue, maternal blood and Cord blood) inside the Specimen Transport Bag or bags (if required). Seal the bag by removing the tear off strip and folding over the flap.

Odată ce probele sunt în interiorul Pungilor de transport Specimen Biohazard și acestea sunt sigilate, scoateti pachetul cu Thermogel din containerul de transport și pliați-l în jurul Pungilor sigilate ce contin probele biologice.



Once the samples are inside the Specimen Transport Bags and sealed, remove the Gel Pack from the shipping container and wrap it around the sealed bag(s)

Plasati mostrele împachetate în pachetul cu Thermogel, înapoi în interiorul containerului de transport. Fixati bine capacul de polistiren în partea de sus a containerului.



Place the Gel Pack wrapped samples back inside the shipping Container. Place the polystyrene lid securely on top of the shipper.

Dupa ce ati pus înapoi capacul de polistiren al containerului de transport, plasati documentația însoțitoare deasupra capacului.




Place the lid back on the Shipping Container and leave any accompanying documentation on top of the polystyrene container.

Închideți Cutia de Transport Exterioara, destinată curierului, și atașați sigiliul de siguranță. Dezlipiti partea din spate a sigiliului și fixați capacul Cutiei de Transport Exterioare.



Close the Outer Shipping Box and attach the security seal. Peel off backing and secure to front of the courier box.

Puneti Cutia de Transport sigilată în interiorul pungii de transport furnizate și sigilați. Eșantionul este acum gata de livrare către laboratorul de procesare. Pastrati cutia la temperatura camerei. Vă rugăm să nu păstrați în frigider.

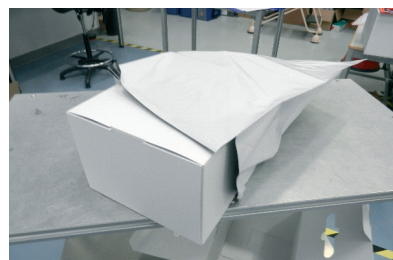

Place the sealed box inside the shipping pouch which is provided and seal. The sample is now ready for shipment to the Processing Laboratory. Keep the box at room temperature. Please do not refrigerate.

**Este important ca aceste instrucțiuni să fie urmate întocmai pentru a asigura păstrarea probelor la temperaturi optime în timpul transportului. Vă mulțumim.**

**It is important these instructions are carried out correctly to ensure the samples are kept at optimum temperatures during transit. Thank You.**